



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦКДЛ «ДОМОДЕДОВСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ЗАВЕДУЮЩАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИЕЙ

ТЕН ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

**Обработка несоответствий, политика возврата
и утилизации проб: критерии брака и управление
ошибками в лаборатории**





ПРАВИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА НЕСООТВЕТСТВИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ОШИБКАМИ В ЛАБОРАТОРИИ напрямую влияют на качество и безопасность персонала

КАЖДОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ —

это не только ошибка, но и точка роста для всей системы качества.

Скорость и качество обработки ошибок напрямую влияет на достоверность результатов и доверие к лаборатории.





ЦЕЛИ ДОКЛАДА

3

Обеспечить первичный контроль поступающих проб на пунктах пробоподготовки в соответствии с ГОСТ

Сформировать направления на лабораторные исследования

Показать роль правильной работы с несоответствиями

Определить критерии брака

Рассмотреть политику возврата и утилизации проб

Обсудить управление ошибками и снижение их числа



В ЦКДЛ Домодедовской больницы выполняются исследования для шести лабораторий:





ГОСТ Р ИСО 15190-2023



Все образцы проходят проверку на пунктах пробоподготовки (ПП)

Учитывая потенциальную биологическую опасность материала от пациентов, персонал обязан:

- быть информированным и обученным правилам безопасного обращения;
- использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, защитные очки);
- применять устройства для безопасного сбора и утилизации использованных игл

Все процедуры выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15190




Что должно быть отражено:

- дата и время назначения;
- дата и время взятия крови
(сбора биологического материала);
- фамилия и инициалы пациента;
- отделение, номер истории болезни, номер палаты;
- возраст, пол;
- диагноз;
- время приема последней дозы препаратов, способных повлиять на результата анализа;
- фамилия и инициалы лечащего врача, назначившего исследование;
- перечень необходимых исследований;
- подпись специалиста, проводившего взятие крови или другого биологического материала

16.09.2025 16:25


0001012302154547

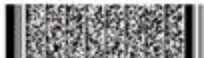

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ №1 от 16.09.2025 г.
в ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница"
Биохимия

Дата проведения исследования: _____ Срочность направления: ☐ Нет

МО: Педиатрическое отделение № 2 Горьковской детской поликлиники (ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница")

Отделение: Кабинеты врача-педиатра участкового (Кабинет 3)

Пациент: _____

Номер карты: _____ Пол: _____

Адрес пациента: _____

Диагноз: K40.9 - Одиноstorонняя или неуточненная паховая грыжа без непроходимости или гангрены

Причина направления: Самообращение по жалобе

Комментарий: _____

Исследования			
Наименование	Результат	Ед. измерения	Норма
A09.05.010 - Исследование уровня общего белка в крови			
A09.05.041 - Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови			
A09.05.042 - Определение активности аланинаминотрансферазы в крови			
A09.05.023 - Исследование уровня глюкозы в крови			
A09.05.021 - Исследование уровня общего билирубина в крови			
A09.05.020 - Исследование уровня креатинина в крови			
A09.05.046 - Определение активности щелочной фосфатазы в крови			
A09.05.017 - Исследование уровня мочевины в крови			

Биоматериалы			
Дата и время взятия	Вид биоматериала	Локализация и способ взятия	Количество

Место для штампа



КРИТЕРИИ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ БИОМАТЕРИАЛА:

7

Расхождение между данными, указанными в сопроводительном направлении и данными на этикетке;

Контейнер с б/м (номер штрих-кода, фамилия пациента, вид биоматериала и т.д.);

Отсутствие штрихкода на контейнере с биоматериалом;

Невозможность прочесть на направлении и/или, фамилию пациента, неправильно наклеенный штрих-код;

Отсутствие в сопроводительном направлении штрих-кода, названия отделения, № истории болезни, ФИО лечащего врача, подписи процедурной сестры, перечня необходимых исследований, диагноза;

Гемолиз, хилёз;

Взятый материал находится в несоответствующей емкости (то есть материал взят не с тем антикоагулянтом, консервантом и др.);

Наличие сгустков в пробах с антикоагулянтом;

В пробах кровь взята не в должном объеме;

Материал взят в вакуумные емкости с просроченным сроком годности.



Наличие одного критерия для отказа - повод не принимать биоматериал на исследование.

Сотрудник лаборатории убирает пробу в пакет для деструкции



На сопроводительном направлении делает отметку о причине отказа и фиксирует в журнале

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Начит « ____ » _____ 20 ____ г.

Освещено « ____ » _____ 20 ____ г.

В журнале прочитано и
проверено _____ стр.

Начальник производственного
отдела подрайонной организации

Ответственный за ведение журнала

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.



Основные типы несоответствий:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ — сбои оборудования, ошибки измерений

ОШИБКИ ПЕРСОНАЛА — неправильная маркировка, неточности при работе

НАРУШЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ — несоблюдение температурных условий, повреждение упаковки

СИСТЕМНЫЕ СБОИ — недостатки в документации, организации процессов



ГОСТ Р 53079.4 – 2008

Технологии лабораторные клинические.
Обеспечение качества лабораторных исследований.
Часть 4.
Правила ведения преаналитического этапа.

1

ГОСТ Р 53079.4 – 2008

Технологии лабораторные клинические.
Обеспечение качества лабораторных исследований.
Часть 3.
Правила взаимодействия персонала клинических подразделений и клинко-диагностических лабораторий медицинских организаций при выполнении клинических лабораторных исследований.

2

ГОСТ ISO 6710-2021

Межгосударственный стандарт
«Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые»

3



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП (2021-2024)

11



МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ Требования к качеству и компетентности (ISO 15189:2013, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2024



ЛАБОРАТОРИИ МЕДИЦИНСКИЕ Требования безопасности (ISO 15190:2016, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2023



ЛАБОРАТОРИИ МЕДИЦИНСКИЕ Требования к взятию, транспортированию, получению и обработке биологического материала (ISO/TS 20658:2017, Medical laboratories — Requirements for collection, transport, receipt, and handling of samples, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ОДНОРАЗОВЫЕ Технические требования и методы испытаний (ISO 6710:2017, Single-use containers for human venous blood specimen collection, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021



Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53079.4

Регламентирует разработку подробные инструкции для пациентов и медицинского персонала по подготовке пациентов к проведению лабораторных тестов, правила взятия образцов биоматериалов, условия их первичной обработки, краткосрочного хранения и транспортирования в лабораторию.



Технологии лабораторные клинические
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Часть 4

Правила ведения преаналитического этапа

Издание официальное

63 5—2008/103





Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская больница»		
	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	Номер: № СМК-ПР РЗН- ИП-02
		Количество листов 18 л.
Название: Идентификация биоматериала		Подразделение: все отделения ГБУЗ МО «Домодедовская больница»
Действует с 31.01.2024	Заменяет: Или вводится впервые	Дата следующего пересмотра (актуализации):
Разработал: ст. фельдшер-лаборант Полянова АС		Причина пересмотра:
Проверил: врач КДЛ Козырева Т.В.		«Утверждаю»
Согласовано: заведующая клинико-диагностической лабораторией Тей Е.А.		Генеральный директор ГБУЗ МО «Домодедовская больница» Овчин А.А.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская больница»		
	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	Номер: № СМК-ПР РЗН- ИП-03
		Количество листов 8 л.
Название: СОП «Идентификация личности пациента при обращении в поликлинику»		
Действует с 20.03.2024		Заменяет № СМК-ПР РЗН- ИП-03 от 31.01.2024: Или вводится впервые
Разработал: врач по рентгенодиагностической диагностике и лечению Н.В. Носков		Причина пересмотра: внесены дополнения в раздел правовое основание
Проверил: зав. кабинетом неотл. травматологии и ортопедии Журавлев Д.Е.		
Отрецензировал: зав. отд. ВКХиБМД А.Ю. Новикова		

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская больница»		
	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	Номер: № СМК-ПР РЗН- ИСМП-04
		Количество листов 20 л.
Название: «Забор венозной крови вакуумным способом»		Подразделение: все клинические и поликлинические отделения медицинской организации
Действует с 01.01.2024	Заменяет: СОП № 2 от 17.12.2018 г.	Дата следующего пересмотра (актуализации):
Разработал: главврач О.Н. Савельева		Причина пересмотра: «Методическое сопровождение по организации ВКХиБМД»
Проверил: рабочая группа по жал. безопасности		



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

