



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Прием и регистрация проб в ЦКДЛ
- Интеграция с ЛИС
- Первичная валидация результатов



ГБУЗ МО «КОЛОМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ЗАВЕДУЮЩАЯ КДЛ: ГИШАРОВА Е.С.



Правильная доставка

- Соблюдение температурного режима
- Использование правильных контейнеров
- Соблюдение временных интервалов
- Соответствие ГОСТ Р 53079.4—2008

Последствия повторного взятия биоматериала

Финансовые потери

Потеря времени

Несвоевременное лечение

Потеря доверия



ТОЧНОЕ СОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ –
быстрое, качественное и точное
выполнение анализа.

**Основные моменты, которые следует учесть
при подготовке пробирок и их доставке:**

- надежная упаковка, соответствующая
требованиям санитарно-
эпидемиологического режима



- температурный режим



- время транспортировки






ПРАВИЛЬНО:

- Вертикальное хранение на штативе
- Один тип материала в одном контейнере
(только кровь, только моча и т.д.)
- Плотны закрытые и подписанные пробирки
- Маркировка «Биологический материал»

НЕДОПУСТИМО:

- Хранение горизонтально
- Смешивание материалов
(кровь + моча) в одном контейнере
- Пробирки с протечками или без этикеток
- Отправка без маркировки

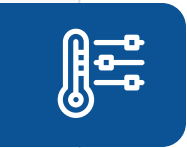

Температура

2...8°C

37°C



Тип исследования

Биохимия, гормоны, ОАК, ОАМ и другие

Посев на стерильность



Технология

Пассивное охлаждение
(Хладагент/лед)

Активный подогрев
(Встроенные термоэлементы)



Оборудование

Стандартный термоконтейнер

Специализированный термо-контейнер



ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ –
кровь должна быть доставлена в лабораторию как можно скорее!

Доставка возможна в течение 2 часов?

ДА

Транспортировка
в стандартном термоконтейнере

НЕТ

ДЕЙСТВИЕ: Срочно создать специальные
условия хранения.
Условия зависят от типа исследования!



РЕГИСТРАЦИЯ ПРОБ В ЛИС

7

Получение биоматериала

Не зашифровано | lrs-kolomna.emias.mosreg.ru:3090/lab/sampling

EMIAS MO Медицинская Ук... Производный ка... ЦЛИС

Лаборатория / Производный кабинет / Получение биоматериала

Поликлиника г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 21, каб. 112, 1 э...

Получение биоматериала

Реквизиты: Пациент (Ф. И. О., дата рождения) Тип биоматериала: Все биоматериалы Дата регистрации с: Дата регистрации по: ПРИМЕНИТЬ ОЧИСТИТЬ

Список заказчиков

Тест т т

С/В	№ заказа	Дата регистрации	Тип материала	ID	ВВ	Место взятия	Дата взятия	Комментарий	Кол-во услуг	Пациент	Дата рождения
S	2505060092952701	06.05.2025 14:01:04	Сыворотка	06057001	✓	✗	06.05.2025 14:00:25	✓	1	Тест ТТ (М)	✓
S	2411290024294601	29.11.2024 10:38:28	Сыворотка	2811202424	✓	✗	29.11.2024 10:38:28	✓	4	Тестиков Тестик Тестикович (М)	01.01.1987 37 лет
S	2411290024271201	29.11.2024 10:08:03	Сыворотка	2911202420	✓	✗	29.11.2024 10:05:30	✓	4	Тестов ТТ (М)	01.01.1991 33 года
S	2410300012367301	30.10.2024 14:19:36	Сыворотка	3010110	✓	✗	30.10.2024 14:19:22	✓	6	Тест ТТ (М)	12.06.1993 31 год
S	2410300012217101	30.10.2024 12:01:18	ВК	3010101	✓	✗	30.10.2024 12:01:11	✓	6	Тест ТТ (М)	12.06.1993 31 год
A	2410290011441301	29.10.2024 08:10:48	Сыворотка	2910101	✓	✗	29.10.2024 08:08:34	✓	5	Тест ТТ (М)	12.06.1993 31 год
I	2410280011292101	28.10.2024 15:30:09	ВК	281001	✓	✗	28.10.2024 15:30:01	✓	1	Тест ТТ (М)	12.06.1993 31 год
I	2410280011265701	28.10.2024 15:02:08	ВК	28102451	✓	✗	28.10.2024 15:01:57	✓	1	Тест ТТ (М)	12.06.1993 31 год

Пациент: Тест ТТ (муж)

Возраст:

Комм. заказа:

Пробирка 13x100, красная крышка


A09.05.044 — ГГТ


всего услуг: 1



- Все входящие пробы должны быть обязательно маркированы штрих-кодами в момент регистрации в модуле «Сортер»

- В ЛИС фиксируется дата и время поступления пробы в лабораторию

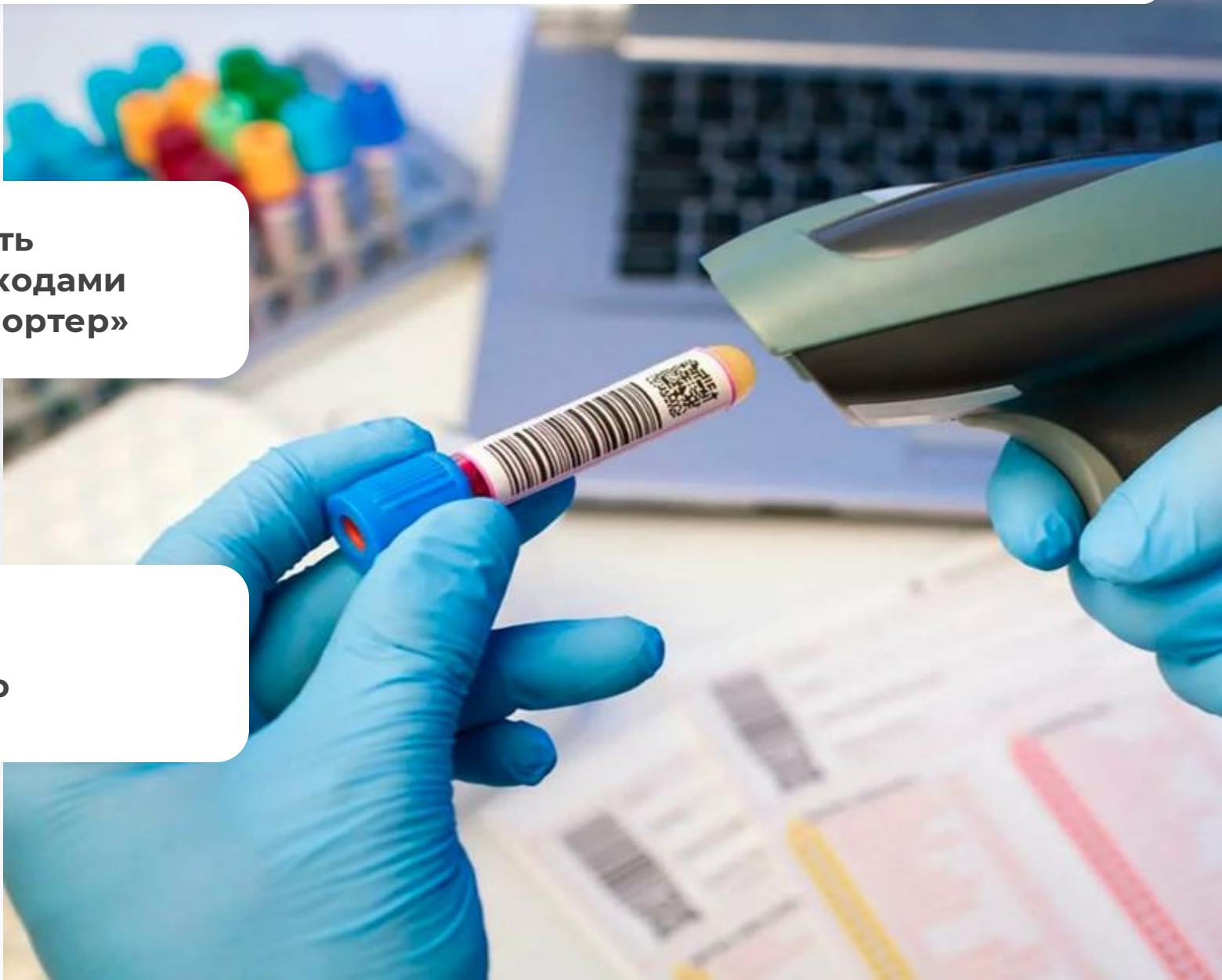

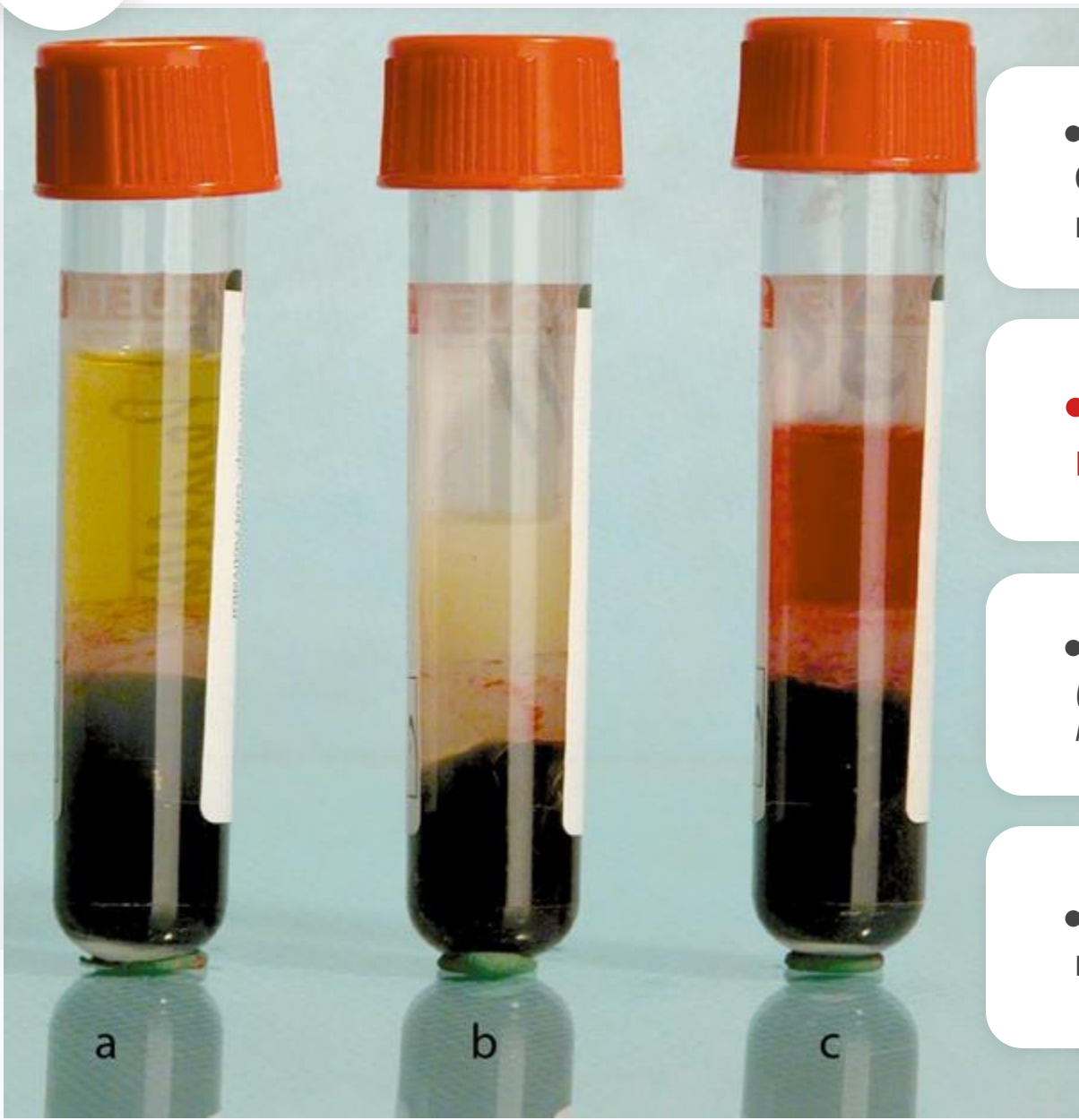

- Отсутствие маркировки на емкостях с биоматериалам или нечеткая маркировка – причина ошибок идентификации биоматериала

- **Лаборатория не имеет права принимать не маркированные емкости!**


- **Визуально проба с нарушением преаналитики**
(сгусток, гемолиз, хилёз, нарушение соотношения, проба взята в неправильную среду и тд)

- **«МАТЕРИАЛ НЕ НАЙДЕН»** - Штрих-код направления из ЕМИАС не привязан к ids пробы



С момента регистрации пробы в лис возможно проведение лабораторного анализа

- **Ручные методики предусматривают внесение результатов анализа руками**
- **Современные автоматические анализаторы имеют возможность подключения к ЛИС с двусторонним обменом данными, что исключает ошибки связанные с человеческим фактором и повышает скорость получения результата**

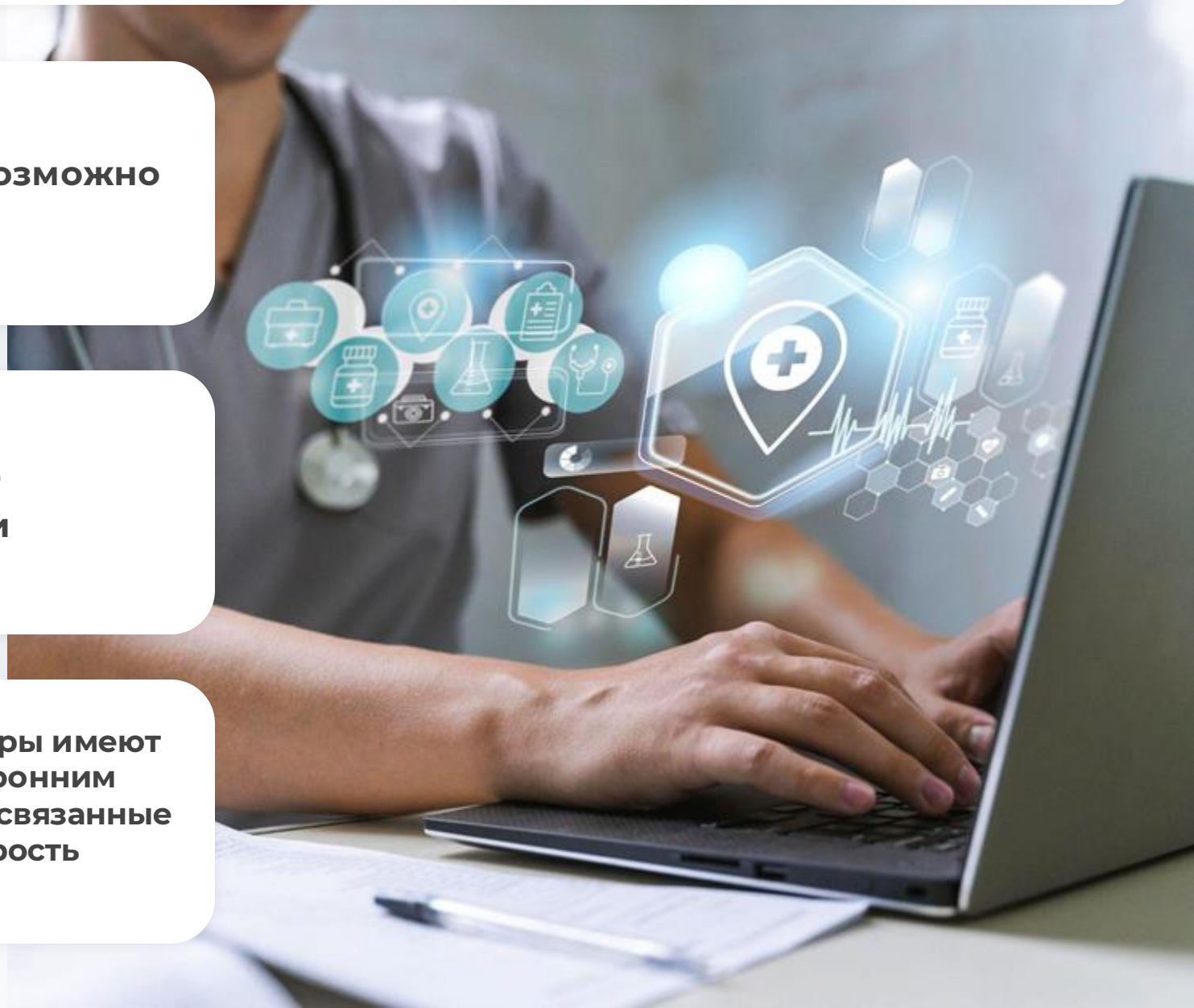




ПЕРВИЧНАЯ ВАЛИДАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

11

- Проверки данных сразу после получения результатов в ЛИС на соответствие нормам, наличие ошибок ввода и технических артефактов.
- Стандарт **ISO 15189-2024** позволяет использовать автоматическое одобрение результатов на основе разработанных лабораторией критериев
- Настройка первичной автовалидации ускоряет процесс получения результата, снижает нагрузку на врача КЛД и вероятность человеческих ошибок.
- Патологические пробы передаются на валидацию врачу КЛД

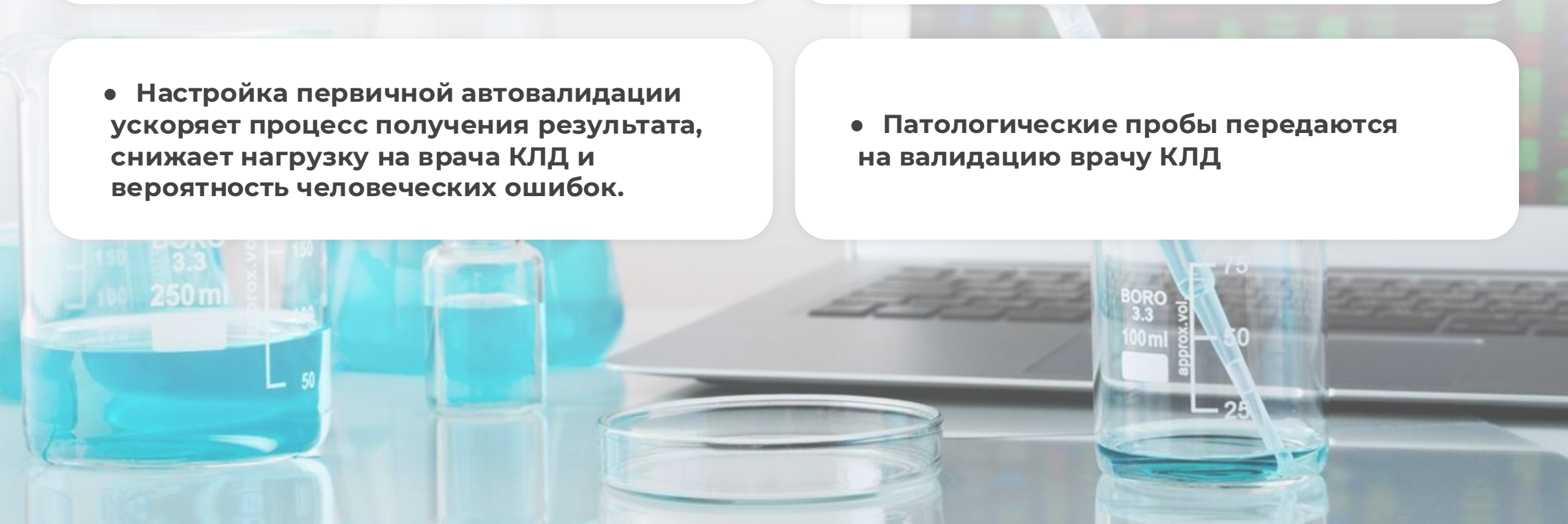




Положительные стороны

- Процесс одобрения результатов на основании системы правил, проходящий в режиме реального времени без участия сотрудников лаборатории
- Позволяет значительно уменьшить количество ошибок, повысить качество выполняемых исследований, ускорить выдачу результатов
- Снизить нагрузку на врачей КДЛ и сосредоточить их внимание именно на тех результатах, где возможна потенциальная ошибка

Зоны риска

- Необходимы выверенные значения всех данных, внесенных в ЛИС (*референсные интервалы, единицы измерения, методики, название оборудования и тд*)
- Каждая ЦКДЛ должна разработать для себя критерии автоматической валидации
- Каждый из критериев должен пройти тщательное тестирование и согласование с медперсоналом, чтобы избежать ошибок и обеспечить безопасность пациентов
- ЛИС должна обеспечить возможность создания таких критериев и выполнять автоматическое одобрение результатов на их основе

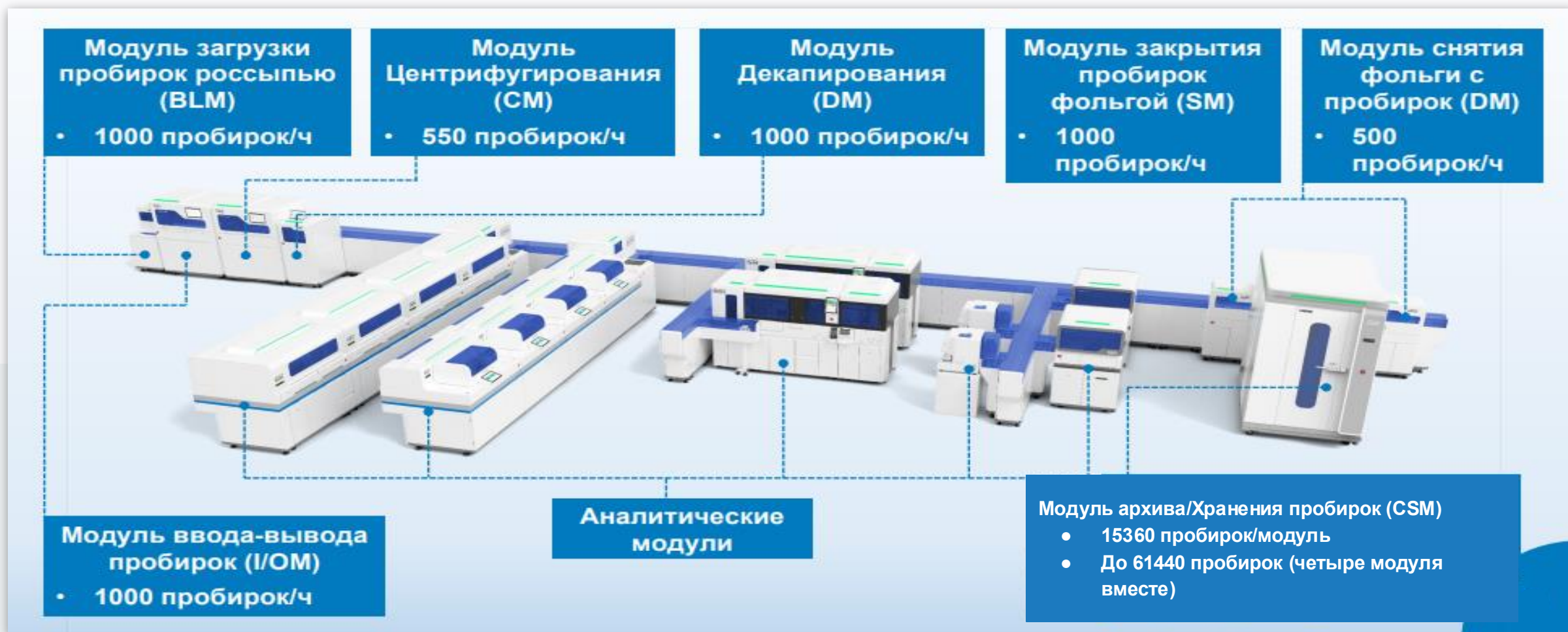



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Только совместная работа лаборатории, IT-службы, администрации
и клинических специалистов ведет к успеху**





МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !